



dentoflex.inp
sistema de implantes

**CATÁLOGO DE PRODUTOS
2026**

Search



SEGURANÇA PARA QUEM TEM MAXILA ATRÓFICA

A linha Search veio com uma evolução aos implantes longos. Criado com base no Cone Morse esse implante pode ser utilizado nas técnicas All-on-four e pterigóideo.

CARACTERÍSTICAS:

Produzido em Titânio ASTM F67

Grau IV

Corpo cônico, rosca dupla

Apresenta cone de 11,5° e rosca

1,8 mm

Plataforma Switch

Alta estabilidade inicial

Indicado para colocação na profundidade de 1, 2 e 3mm

Para posicionamento intraósseo é recomendado adicionar 1 a 2 mm ao comprimento do implante durante a instrumentação cirúrgica

Acompanha tapa implante


Para osso tipo III e IV


CHAVES DE CAPTURA E INSTALAÇÃO DO IMPLANTE



Disponível nos tamanhos Curto e Longo

Descrição	Código
Chave Catraca Curta	55882
Chave Catraca Longa	55883
Chave C.A Curta	55834

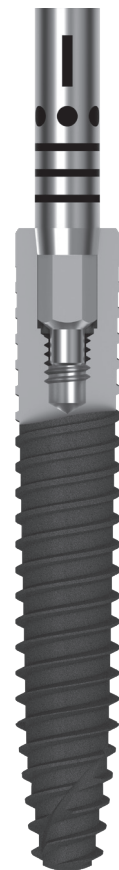

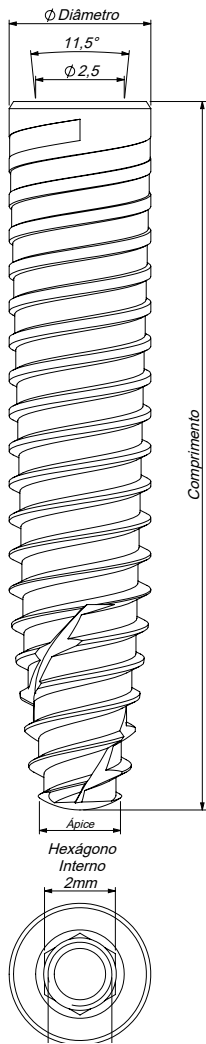

Diâmetro

Comprimentos

ϕ 3,75	18 mm 59756	20 mm 59757	22,5 mm 59759	25 mm 59761
ϕ 4,00	18 mm 59762	20 mm 59763	22,5 mm 59765	25 mm 59767

Sequência de Brocas

Implante	Lança	Helicoidal ϕ 2,30MM Longa	Supreme ϕ 3,75MM Longa	Supreme ϕ 4,00MM Longa
3,75 mm	●	●	●	
4,00 mm	●	●	●	●

● Para osso tipo III e IV

TAPA IMPLANTE



1,0 mm

56839

MIRUSCONE ANGULADO



1,5 mm	17°	57925
1,5 mm	30°	57927
1,5 mm	*45°	60110
2,5 mm	17°	57928
2,5 mm	30°	57963
2,5 mm	*45°	60113
3,5 mm	17°	57964
3,5 mm	30°	57966

- ✓ Produzido em Titânio
- ✓ Com Index
- ✓ Com parafuso passante
- ✓ Não deve ser usado para unitário
- ✓ Com transportador metálico
- ✓ Indicado para prótese múltipla e total
- ✓ *Indicação de uso apenas nos implantes Zigomático e Search em protocolo.

ACESSÓRIOS



Parafuso p/ miruscone angulado CM 17° e 30°

58375



Parafuso p/ miruscone angulado CM 45°

61262

MIRUSCONE RETO



0,8 mm	57910
1,5 mm	57911
2,5 mm	57915
3,5 mm	57919
4,5 mm	57923
5,5 mm	57924

- ✓ Produzido em Titânio
- ✓ Distância oclusal mínima: 4,5mm
- ✓ Não deve ser usado para unitário
- ✓ Com transportador plástico
- ✓ Indicado para prótese múltipla e total

Kit Search



Kit único e versátil: evite volume, priorize a qualidade, funcionalidade, e a eficiência no seu dia a dia.

PARA USO NA

Linha Search

GARANTA AGILIDADE E PRATICIDADE AOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

Criado especialmente para garantir a eficiência no dia a dia do seu consultório.

60230

ESTOJO KIT SEARCH

CARACTERÍSTICAS:

Cod.	Descrição	Qtd.
59926	BROCA LANÇA	1
59988	BROCA HELICOIDAL Ø2,30MM LONGA	1
59922	BROCA SUPREME Ø3,75 LONGA	1
60009	BROCA SUPREME Ø4 LONGA	1
59870	EXPANSOR LAMINADOR CÔNICO LONGO Ø2,6	1
59871	EXPANSOR LAMINADOR CÔNICO LONGO Ø2,9	1
59872	EXPANSOR LAMINADOR CÔNICO LONGO Ø3,2	1
59873	EXPANSOR LAMINADOR CÔNICO LONGO Ø3,7	1
55882	CHAVE CURTA IMP. OSSEO COMP CONE MORSE P/ CAT	1
55834	CHAVE CURTA P/ IMP. OSSEO COMP. CONE MORSE P/ C. A.	1
08877	CHAVE DE TORQUE	1
01379	CHAVE DIGITAL HEXAGONAL MÉDIA	1
55883	CHAVE LONGA IMP. OSSEO COMP CONE MORSE P/ CAT	1
01393	CHAVE T FIXA	1
59711	GUIA DE POSICIONAMENTO ALL ON FOUR	1
60088	MEDIDOR DE ANG. 17° E TRANSMUCOSO CM	1
60089	MEDIDOR DE ANG. 30° E TRANSMUCOSO CM	1
60090	MEDIDOR DE ANG. 45° E TRANSMUCOSO CM	1
60084	SONDA CALBRADA PARA IMPLANTE LONGO	1
01415	CHAVE MONTADORA PARA CONTRA ANGULO	1

*Imagens meramente ilustrativas. Os estojos podem apresentar variações de cor e design.

BROCAS

59926 

BROCA LANÇA

59988 

BROCA HELICOIDAL Ø2,30MM LONGA

59922 

BROCA SUPREME Ø3,75 LONGA

60009 

BROCA SUPREME Ø4,00 LONGA

CHAVES

CHAVES DE CAPTURA

55834 

CHAVE PARA IMPL. C.M. PARA CONTRA ÂNGULO

CHAVE DE CAPTURA DE CONTRA ÂNGULO,
TORQUE MÁXIMO 35 N.cm

CHAVES DE INSTALAÇÃO

55882 

CHAVE CURTA P/ IMPL. O.C. C.M. P/ CATRACA

55883 

CHAVE LONGA P/ IMPL. O.C. C.M. P/ CATRACA

01379 

CHAVE DIGITAL HEXAGONAL MÉDIA

01415 

CHAVE DE MONTADOR PARA CONTRA ÂNGULO

EXPANSORES

59870 

EXPANSOR LAMINADOR CÔNICO LONGO Ø2,6

59871 

EXPANSOR LAMINADOR CÔNICO LONGO Ø2,9

59872 

EXPANSOR LAMINADOR CÔNICO LONGO Ø3,2

59873 

EXPANSOR LAMINADOR CÔNICO LONGO Ø3,7

*Imagens meramente ilustrativas. As brocas podem apresentar ou não revestimento DLC.

MEDIDORES


60088

MEDIDOR DE ANG. 17° E TRANSMUCOSO CM



60089

MEDIDOR DE ANG. 30° E TRANSMUCOSO CM

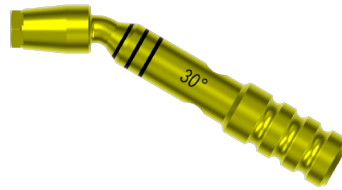

60090


MEDIDOR DE ANG. 45° E TRANSMUCOSO CM



ACESSÓRIOS


60084

SONDA CALIBRADA PARA IMPLANTE LONGO

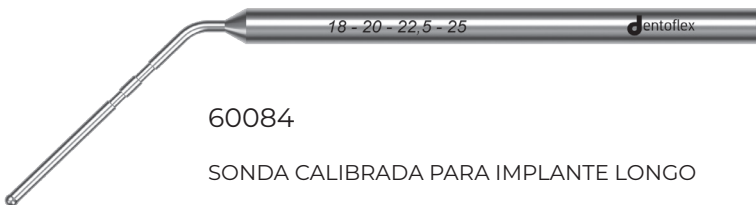

59711

GUIA DE POSICIONAMENTO ALL ON FOUR

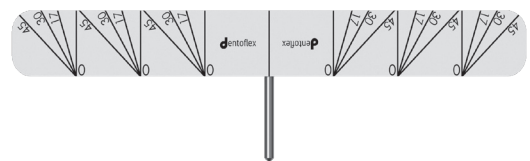

01393

CHAVE T FIXA




















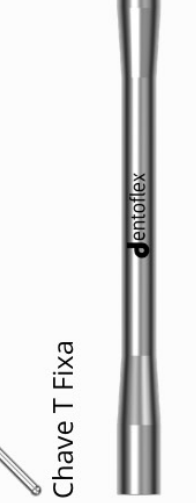
08877

CHAVE DE TORQUE




GUIA PARA MONTAGEM

Kit Search

1. Broca lança 
2. Broca helicoidal Ø2,3 longa 
3. Broca supreme Ø3,75 longa 
4. Broca supreme Ø4,00 longa 
5. Chave p/ impl. CM p/ C.A. 
6. Chave curta p/ impl. O.C. CM p/ catraca 
7. Chave longa p/ impl. O.C. CM p/ catraca 
8. Chave de montador p/ C.A. 
9. Medidor de Ang. 17° e transmucoso CM 
10. Medidor de Ang. 30° e transmucoso CM 
11. Medidor de Ang. 45° e transmucoso CM 
12. Chave digital hexagonal média 
13. Expansor laminador cônico longo Ø2,6 
14. Expansor laminador cônico longo Ø2,9 
15. Expansor laminador cônico longo Ø3,2 
16. Expansor laminador cônico longo Ø3,7 
17. Sonda Calibrada para implante longo 
18. Chave T Fixa 

19. Guia de posicionamento all on four

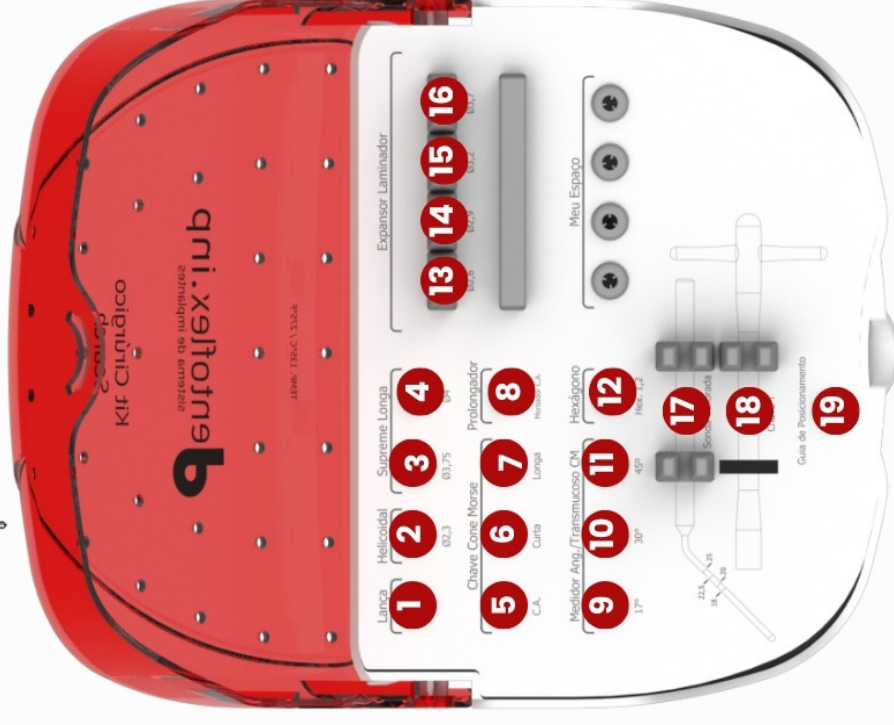

GUIA PARA MONTAGEM

Kit Search

20. Chave de torque



 **dentoflex.inp**
sistema de implantes

⊕ dentoflex.com.br

✉ sac@inp-dentoflex.com

☎ Tel.: 55 11 2083 - 4130

📞 WhatsApp: +55 11 99589-8239

 @DENTOFLEX.OFICIAL