



dentoflex.inp
sistema de implantes

CATÁLOGO DE PRODUTOS
2026


Supreme Guided



Supreme Guided

CIRURGIA 100% GUIADA INTUITIVO, DESIGN ADMIRADO E PRECISÃO

Integramos soluções de odontologia digital, garantindo simplicidade de uso, economia e ótimos resultados.

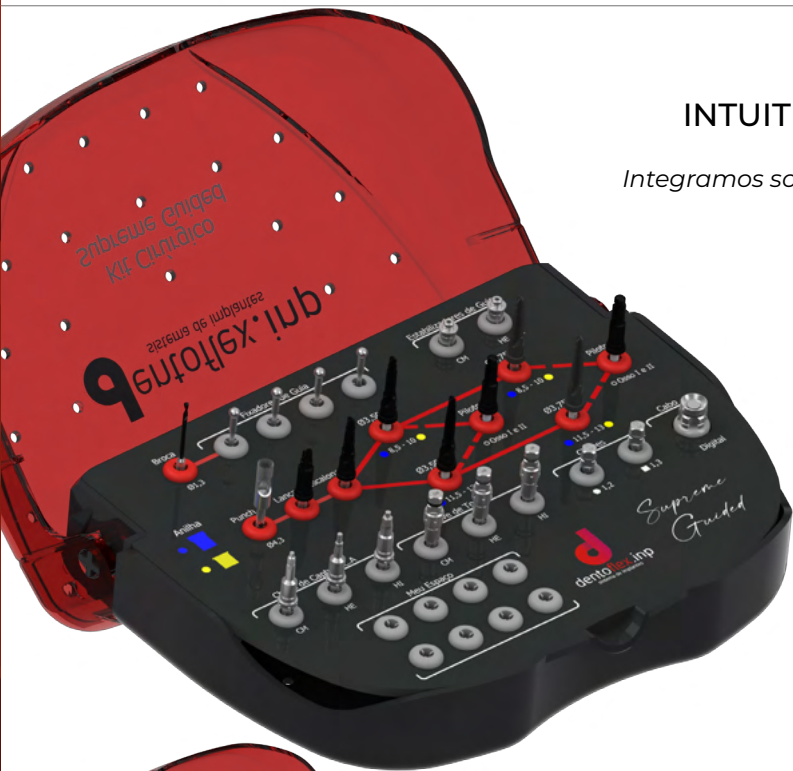

- Material Polímero de PPSU: não oxida e não apresenta manchas;
- Autoclaváveis em até 135°C / 275°F;
- Borrachas em silicone e coloridas para identificação das brocas;
- Escalas para verificação da marcação das ferramentas;
- Tampa inclinável serve de apoio da plataforma no momento da abertura;
- Acomodação para a torquímetro para autoclavagem;
- Estojo leve e de fácil manuseio.

60233

ESTOJO KIT CIRURGIA GUIADA



Broca

Ø 1,3mm



56765

Fixadores de Guia



56666

Estabilizadores de Guia

CM



56664

HI - HE



56665

Punch

Ø 4,3mm



57742

*Imagens meramente ilustrativas.

Os estojos podem apresentar variações de cor e design.

Brocas

Lança



59962

Escalonada



60338

Ø 3,5mm

8,5 10 11,5 13



59987



59989

Ø 3,75mm

8,5 10 11,5 13



59991



59993

Broca Piloto

Ø 2,8 - 3,5



60003

Ø 3,0 - 3,75



60004

*Imagens meramente ilustrativas. As brocas podem apresentar ou não revestimento DLC.

Chaves de Captura para C.A.

CM



57295

HI



59948

HE



59951

Chaves de Torque

CM



59933

HI



59945

HE



59939

Chaves

Hexagonal longa
1,2mm

1.2



01397

Quadrada longa
1,3mm

1.3



01398

Cabo digital
para
chave
torque

01409

Acessórios



Sonda calibrada

60329



Chave de torque

08877

Anilhas



Ø 4,30 x 0,5



60620

Pacote c/ 5 unidades



Ø 4,30 x 2



60621

Pacote c/ 5 unidades




60619

Pacote c/ 5 unidades

Guias para Fixadores

Supreme
Guided

SEQUÊNCIA DE FRESAS

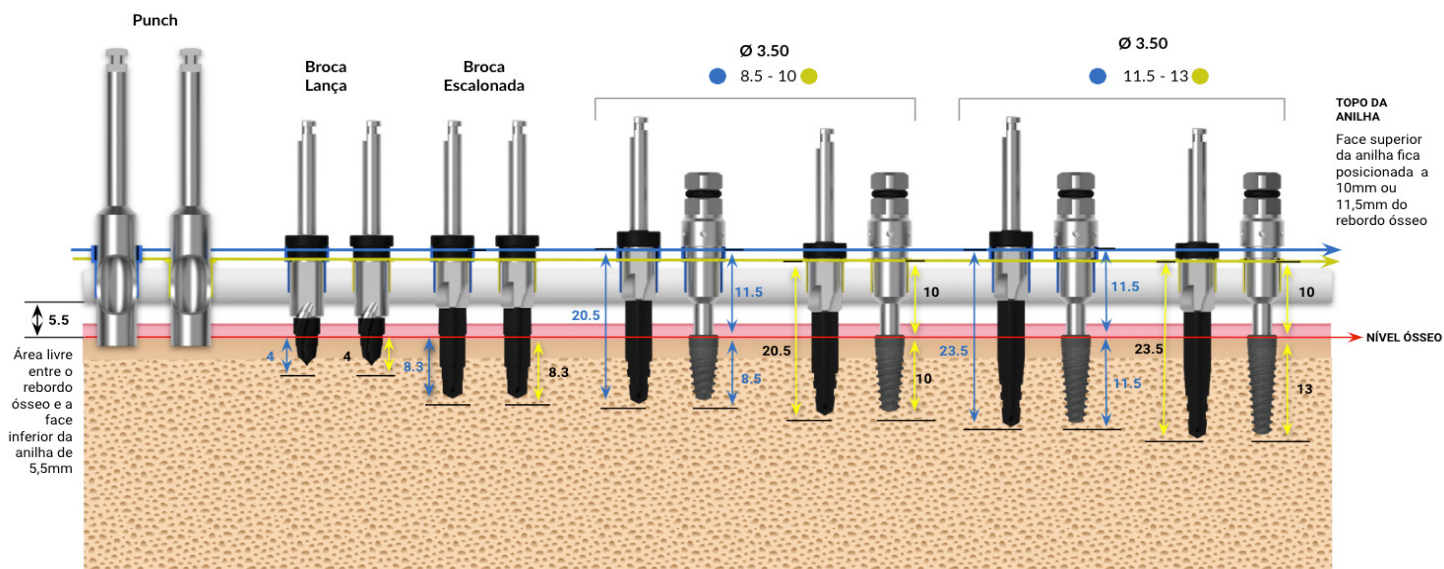


Comunique com o seu paciente de maneira clara e precisa

Com base nas particularidades de cada paciente o planejamento virtual pré-operatório, permitirá que você comunique a esse paciente, sobre como será o tratamento, revelando detalhes do procedimento como: precisão, simplicidade e segurança.



VANTAGENS DA CIRURGIA GUIADA

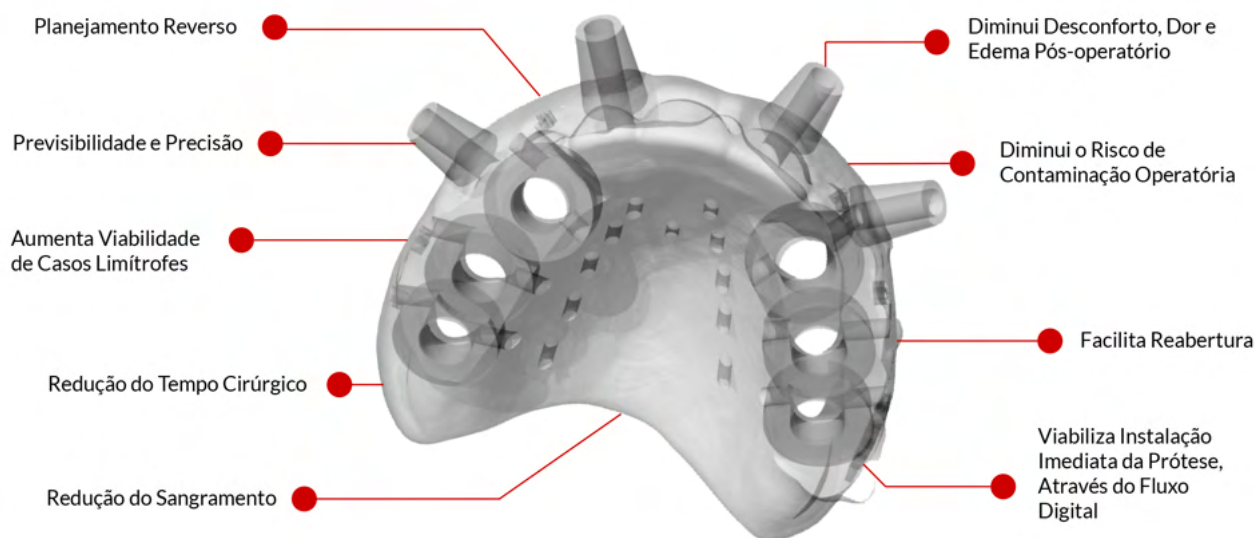

GUIA PARA MONTAGEM

Kit Supreme Guided

1. Broca 
2. Fixador de Guia 
3. Estabilizador de Guia CM 
4. Estabilizador de Guia HI-HE 
5. Punch 
6. Broca lança 
7. Broca escalonada 
8. Broca Supreme Ø3,50 - 8,5-10 
9. Broca Supreme Ø3,50 - 11,5-13 
10. Broca piloto Ø2,8 - 3,5 
11. Broca Supreme Ø3,75 - 8,5-10 
12. Broca Supreme Ø3,75 - 11,5-13 
13. Broca piloto Ø3,0 - 3,75. 
14. Chave de captura p/ C.A. CM 
15. Chave de captura p/ C.A. HE 
16. Chave de captura p/ C.A. HI 
17. Chave de torque CM 
18. Chave de torque HE 
19. Chave de torque HI 
20. Chave hexagonal 1,2mm 
21. Chave quadrada longa 1,3mm 
22. Cabo digital para chave torque 




GUIA PARA MONTAGEM

Kit Supreme Guided

23. Sonda calibrada para cirurgia guiada



24. Chave de torque

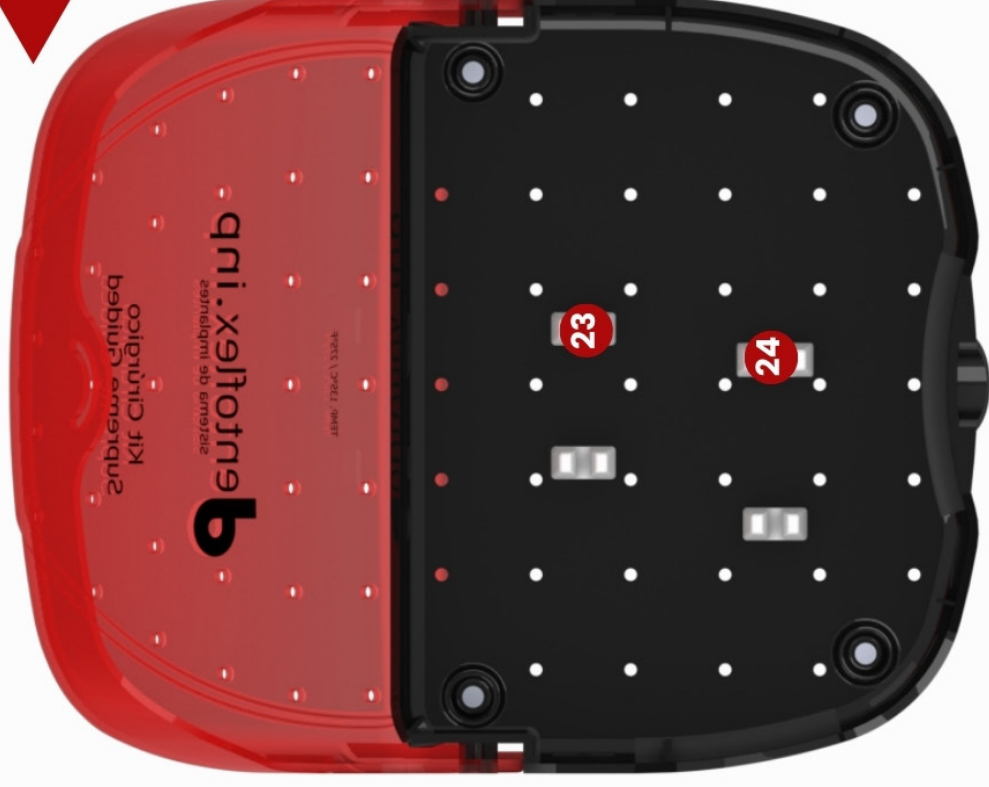



⊕ dentoflex.com.br

✉ sac@inp-dentoflex.com

☎ Tel.: 55 11 2083 - 4130

📞 WhatsApp: +55 11 99589-8239

📷 @DENTOFLEX.OFICIAL